




neodisher® MediClean



Detergente para el reprocesado de instrumental termoestable y termolábil

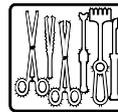

Concentrado líquido

Ámbito de aplicación:

- Limpieza automática y manual de equipos médicos, tales como instrumental quirúrgico, endoscopios, utensilios de anestesia y contenedores

Características:

- Elimina de forma eficaz los residuos de sangre seca, desnaturalizada y endurecida por sustancias activas desinfectantes
- Apto para instrumental y utensilios de acero inoxidable, acero instrumental, plásticos comunes, así como los materiales de lentes y utensilios de anestesia
- La idoneidad del aluminio anodizado deberá comprobarse previamente

Características especiales:

- Alto grado de protección del material
- Componentes facilitadores de la limpieza de baja alcalinidad en una formulación que genera poca espuma
- No es necesaria una fase de neutralización durante el reprocesado automático; por tanto, basta con ciclos de programa cortos

Uso y dosificación:

neodisher MediClean puede emplearse tanto en lavadoras termodesinfectadoras como en baños de inmersión y ultrasónicos. La cantidad de dosificación depende, entre otros factores, del ámbito de aplicación y del grado de suciedad del instrumental. Se recomiendan los siguientes parámetros a la hora de utilizar neodisher MediClean:

Limpieza automática de instrumental termoestable y termolábil	2-10 ml/l (0,2-1,0 %)*, p. ej., 40-60 °C, 10 min
---	--

Limpieza automática de endoscopios flexibles	5 ml/l (0,5 %), 35-55 °C, 3-10 min
Limpieza manual de instrumental termoestable y termolábil en baños de inmersión y ultrasónicos	5-20 ml/l (0,5-2 %)*, máx. 40 °C, 10-30 min
Limpieza manual de endoscopios flexibles y accesorios para endoscopios en baños de inmersión y ultrasónicos	5-30 ml/l (0,5-3 %)*, máx. 40 °C, 5-10 min

* la cantidad de dosificación depende, entre otros factores, del grado de suciedad

Emplear dosificadores adecuados para la dosificación.

Se recomienda el uso de agua desmineralizada en la fase de limpieza y el aclarado final. Utilizar agua desmineralizada en el aclarado final evitará manchas de agua y, al mismo tiempo, protegerá el aluminio anodizado.

Puede prescindirse de la fase de neutralización que requieren los detergentes alcalinos clásicos. Para el reprocesado de instrumental oftalmológico se recomienda una fase adicional de aclarado intermedio con agua antes del aclarado final.

La solución de aplicación para la limpieza manual debe renovarse, como mínimo, después de cada jornada laboral y de inmediato en caso de suciedad visible.

Instrucciones de uso generales:

- Solo para uso profesional.
- No mezclar con otros productos.



neodisher® MediClean

- Antes de cambiar de producto, enjuagar con agua el sistema de dosificación, incluyendo las mangueras de succión.
- El reprocesado deberá realizarse mediante los procedimientos validados adecuados de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y las normativas vigentes.
- Enjuagar toda la solución de aplicación neodisher MediClean con agua (preferiblemente desmineralizada).
- Tenga en cuenta las recomendaciones de reprocesado del fabricante del producto sanitario según los requisitos de la norma UNE-EN ISO 17664
- Deberán tenerse en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de la lavadora termodesinfectadora.

Datos técnicos:

Valor pH	10,2-10,5 (2-20 ml/l, determinado en agua desmineralizada, 20 °C); el valor pH puede variar en el caso de aguas municipales, agua ablandada o agua arrastrada del aclarado previo.
Densidad	aprox. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viscosidad	< 10 mPa s (concentrado, 20 °C)
Factor de valoración	0,8 (según las instrucciones de valoración de neodisher MediClean)

Componentes:

Componentes para detergentes según el Reglamento CE sobre detergentes 648/2004:
< 5 % de tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos
además: enzimas

Marca CE: 

neodisher MediClean cumple los requisitos de la legislación europea sobre productos sanitarios.

Si se produce un incidente grave con este producto, se deberá notificar al fabricante y a las autoridades competentes.

Instrucciones de almacenamiento:

Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas. Durante el almacenamiento deberá mantenerse una temperatura de entre 0 y 25 °C. Proteger de la luz solar. Si se hace correctamente, puede almacenarse durante 2 años. Caducidad: véase impresión en la etiqueta detrás del símbolo .

Advertencias de peligro y seguridad:

neodisher MediClean no es una sustancia peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 («Reglamento CLP»).

Deseche el recipiente completamente vacío y cerrado. Para la eliminación de los residuos del producto: véase la ficha técnica de seguridad.

Para más información sobre seguridad y medio ambiente, consulte las fichas técnicas de seguridad. Podrá encontrarlas en www.drweigert.com/es en el apartado «Servicios/Descargas».

MB 4043/2-6 Versión 08/2020

La información incluida en esta ficha técnica está basada en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No exime al usuario de realizar sus propias pruebas y comprobaciones, ni ofrece garantías jurídicamente vinculantes de determinadas características.