

 **Medicom**<sup>®</sup>

**SafeSeal**<sup>®</sup> | **Quattro** 

Sterilisationsbeutel  
und -schläuche



Sicher  
verpackt

**LOSER & CO**  
*öfter mal was Gutes...*






Medicom SafeSeal® Quattro Sterilisationsbeutel und -schläuche sind zuverlässige Hilfen für die validierte Aufbereitung und sichere Lagerung des Sterilgutes. Beide Varianten haben eine spezielle Seitenversiegelung für eine perfekte Verbindung zwischen Folie und medizinischem Papier. Die reißfeste, mehrschichtige Folie aus Polypropylen und Polyethylen ermöglicht zudem die Sichtprüfung des Inhaltes. Interne und externe Indikatoren bestätigen die Sterilisationsparameter Zeit, Temperatur und Dampf.

# SafeSeal® Quattro Sterilisationsbeutel

Maximale Effizienz! Die selbstklebenden Beutel sind ohne Versiegelungsgerät einsetzbar, passend zugeschnitten und in vielen Abmessungen erhältlich. Die Beutel müssen nur befüllt und im Anschluss verschlossen werden. Dazu einfach den breiten Klebestreifen abziehen und die Lasche sorgfältig andrücken.

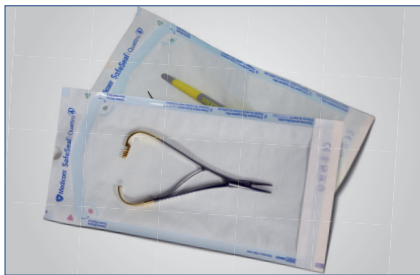

# SafeSeal® Quattro Sterilisationsschläuche

Die Schläuche gibt es in unterschiedlichen Breiten. Die erforderliche Länge der einzelnen Verpackung wird von der Rolle abgeschnitten. Danach wird zunächst eine Seite des Schlauches versiegelt, anschließend das Sterilgut eingebracht und dann die zweite Seite versiegelt. Zum Versiegeln ist ein medizinisches Folienschweißgerät erforderlich.



# Merkmale und Funktionen

## **Beschaffenheit**

Sichert die Sterilität des Inhalts

## **Durchlässigkeit**

Ermöglicht das Eindringen von Dampf

## **Drapierbarkeit**

Passt sich den Konturen des Inhaltes gleichmäßig an

## **Durchstichfestigkeit**

Vermeidet Defekte durch scharfe Instrumente

## **Reißfestigkeit**

Verhindert das Zerreißen

## **Transparenz**

Macht den Inhalt sichtbar und lässt Perforationen erkennen

# Bestellung

+49 [0] 21 71 - 70 66 70  
info@loser.eu



**Medicom**

**SafeSeal® | Quattro 4**

Flache Sterilisationsbeutel – selbstklebend



Packung

Inhalt: 200 Stück


Größe:	57 x 102 mm	70 x 229 mm	89 x 133 mm	89 x 229 mm
Art.-Nr.:	88015	88000	88005	88010

Größe	133 x 254 mm	191 x 330 mm	254 x 356 mm	305 x 432 mm
Art.-Nr.:	88025	88030	88035	88040

**Medicom**

**SafeSeal® | Quattro 4**

Flache Sterilisationsschläuche

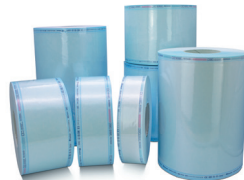

Rolle

Länge: 200 m

Breite:	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Art.-Nr.:	9850	9860	9870	9880	9890	98100	98110

Irrtum und Preisänderung vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

