



BESONDERS VERTRÄGLICHE RESTAURATIONSMATERIALIEN

Jetzt neu peek primer und zirconia primer!

Höchstverträgliche Schweizer Qualitäts-Produkte,
entdecken Sie unsere beiden Neuheiten **peek primer** und
zirconia primer.



NEU


NEU

zirconia primer

Eignung	Zirkoniumdioxid-Oberflächen
Lösemittel	Ethanol
Lagerhaltbarkeit	2 Jahre
Inhalt	5 ml
Artikelnummer	REF 8067

Konditionierung

Zirkondioxid-Gerüste mithilfe 110 μ Aluminiumoxyd bei 2 - 3 bar aufrauen, mit ölfreier Luftdruck reinigen, Oberfläche mit **zirconia primer** benetzen, anschliessend aushärten.

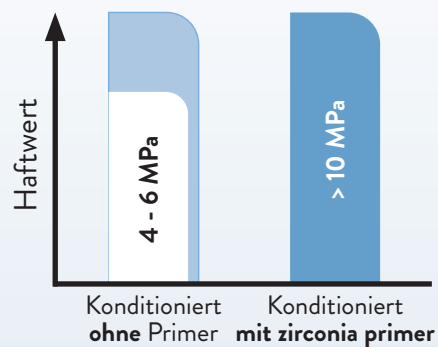

peek primer

Eignung	Peek- und Composite-Oberflächen
Lösemittel	Frei von Lösemittel
Lagerhaltbarkeit	2 Jahre
Inhalt	5 ml
Artikelnummer	REF 8016

Konditionierung

Verblendschalen, künstliche Zähne bzw. zu primende Materialien mithilfe 110 μ Aluminiumoxyd bei 2 - 3 bar aufrauen, Oberfläche mit **peek primer** benetzen, anschliessend aushärten.

